



Plataforma Energética **ENER REACH**

OP9 Duo-Generador de energía

OSA Sellador/divisor

SR7 Tijera ultrasónica



Tecnología
Tissue Sense



Sellado de
vasos de 7 mm



Plataforma Duo-
Energy



Interfaz de
pantalla táctil


Avance de la fuerza

la nueva plataforma de energía OP9




Tecnología Tissue Sense

La tecnología Tissue Sense supervisa constantemente las señales en la mandíbula del instrumento y ajusta la potencia de forma inteligente para conseguir un sellado óptimo, una transección rápida y una generación de calor mínima.

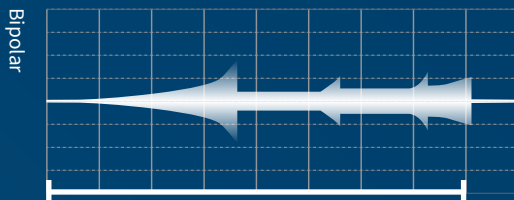

Sellado inteligente

Supervisa constantemente la impedancia y ajusta el ciclo de sellado

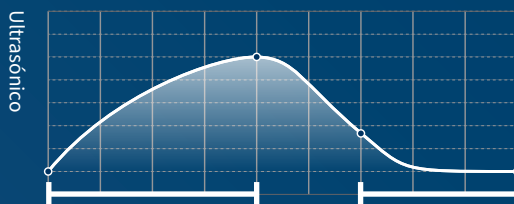

Activación sensible
Salida de energía inteligente
Activación suave

Protección de la almohadilla
Ajuste de salida
Control térmico preciso



Sellado de recipientes de 7 mm

Capacidad de sellado seguro de recipientes de hasta 7 mm con las tijeras OSA y SR7.




RF y ultrasonidos Plataforma de doble energía



Pantalla táctil de 7



Interfaz multilingüe

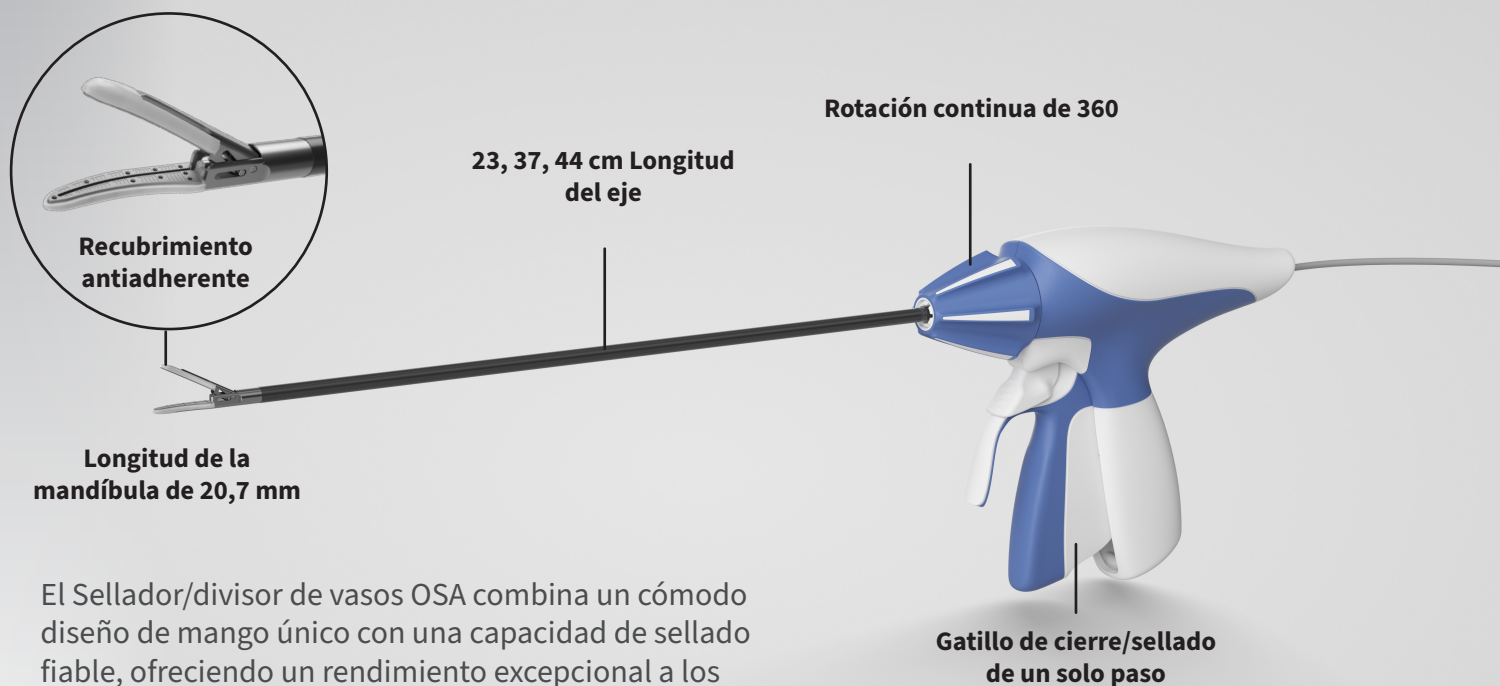

El Sellador/divisor de vasos OSA combina un cómodo diseño de mango único con una capacidad de sellado fiable, ofreciendo un rendimiento excepcional a los cirujanos que buscan precisión en el sellado de vasos.

Sellador/divisor de recipientes serie OSA



Ergonomía mejorada

Con un diseño de mandíbula larga, delgada y curvada, junto con una gran fuerza de retención de la mandíbula, el OSA facilita la disección sin esfuerzo y con precisión.



Sellado de vasos de 7 mm

Con nuestra exclusiva tecnología Tissue Sense, el Sellador/divisor de vasos OSA sella con confianza tejidos gruesos y vasos de hasta 7 mm, garantizando resultados fiables en todo momento.




Recubrimiento antiadherente

Revestimiento antiadherente patentado minimiza la adherencia, reduce la acumulación de escaras y simplifica la limpieza durante los procedimientos. Su superficie lisa y dispersión térmica de $2.23 \text{ mm} \pm 0.05 \text{ mm}$ optimizan la seguridad.

Especificaciones

Código del producto	Longitud del eje	Disciplina	Descripción	CANT.
OSA23	23 cm	Cirugía abierta	Cizalla con recubrimiento antiadherente, 5mm	3
OSA37	37 cm	Cirugía laparoscópica		
OSA44	44 cm			

Tijeras Serie SR7

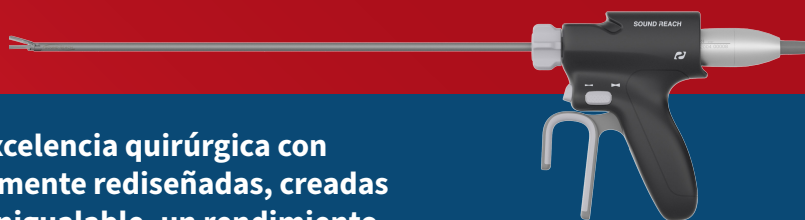

Experimenta el siguiente nivel de excelencia quirúrgica con nuestras Tijeras Serie SR7 completamente rediseñadas, creadas para proporcionar una comodidad inigualable, un rendimiento excepcional y una confianza inquebrantable en la seguridad.



Sellado de Vasos de 7mm

La característica de Hemostasia Avanzada en las tijeras SR7 amplía el alcance de las aplicaciones quirúrgicas, ofreciendo la seguridad de un sellado fiable y seguro de vasos de 7mm.



Diseño Mejorado de la Mandíbula

El nuevo diseño mejora la fuerza de agarre y la precisión del cierre. Su cuchilla con recubrimiento antiadherente reduce la acumulación de tejido, e incorpora llave de torque para un control firme y seguro.



Ergonomía Cómoda

El mango contorneado de las tijeras SR7 se ajusta perfectamente a las manos de los cirujanos, mientras que el acolchado suave, cóncavo y elástico mejora la fuerza de agarre, reduciendo el riesgo de deslizamiento durante las cirugías. El mango tipo pistola con diseño curvado brinda control total y comodidad, mientras su rotación de 360° mejora la maniobrabilidad y acceso en cirugías abiertas o laparoscópicas.

Specifications

Código del producto	Sellado de Vasos (hasta)	Longitud del eje (cm)	Disciplina
SRB14	7 mm	14	Procedimientos Abiertos, de Otorrinolaringología
SRB23		23	Procedimientos Generales, Pediátricos
SRB36		36	Procedimientos Generales, Bariátricos, Ginecología, Urología, Colorrectales Endoscópicos
SRB45		45	Procedimientos con Pacientes Obesos

Contacto

Global Headquarter
120 Xinxing Road
West Zone, TEDA
300462 Tianjin
China

T +86-22-25326259
F +86-22-66200915

Importador



Distribuidor

